


广西灭活病毒采样管出口企业

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：3

1、病毒采样管的用处?用于流感、禽流感、冠状病毒等病毒样本的收集、运送和储存等，以便后续提取、扩增运用。2、灭活与非灭活保存液的差异?病毒样品在收集之后，一般样品收集处都不能及时进行PCR检测，所以需要收集到的病毒拭子样本进行运送，而病毒本身在体外很快就会裂解然后影响后续检测，所以在保存及运送时，就需参加病毒保存液，对于不同的检测意图，需运用不同的病毒保存液。目前首要分为灭活型和非灭活型两种，为了满意不同的检测要求，以及不同的病毒检测实验室条件，选用不同的保存液是非常有必要的。灭活型保存液：生物保存液B能裂解灭活样本中的病毒，使病毒损失活性。含有抑制剂，能维护病毒核酸不被降解，然后使后续能经过NT-PCR进行检测。并且能在常温下保存相对较长的时间，节省了病毒样品保存以及运送的成本。病毒采样管也可以用于支原体、衣原体和解脲支原体等检测采样。广西灭活病毒采样管出口企业

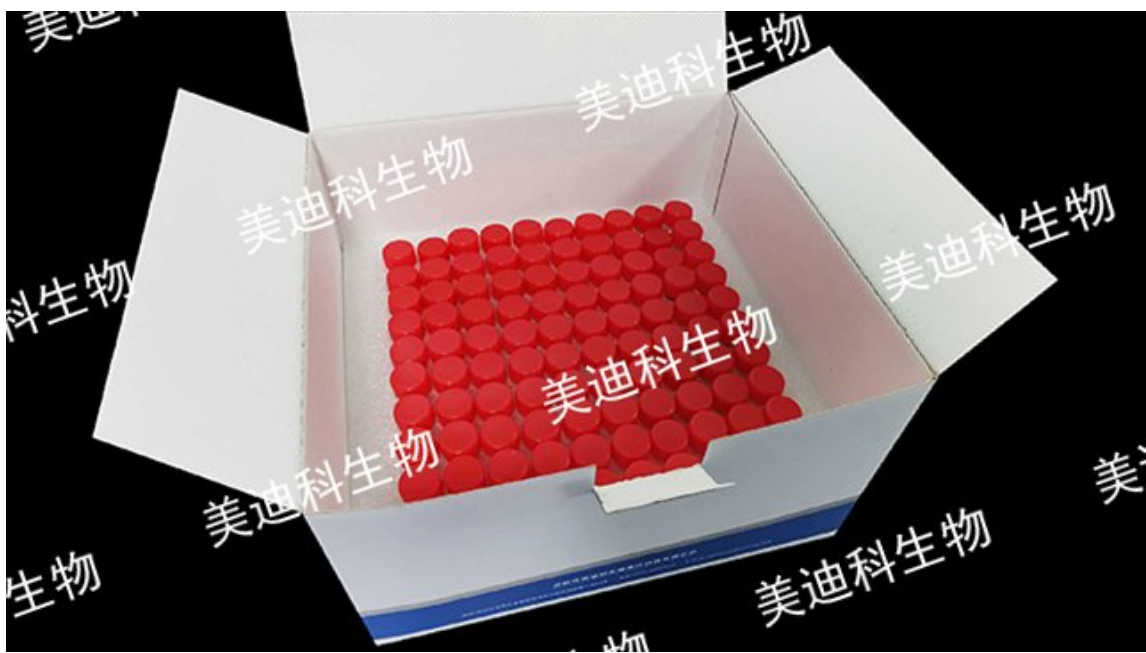

3. 操作方便。管壁应光滑平整，标签完整牢固，字迹清晰，信息书写方便，贴相关条码不掉角。同时，瓶盖与管体的松紧度要适中，不能过紧，使采样检测人员一只手就能正常开合瓶盖，提高操作效率。4. 适当的规格。病毒采样管外径为 $(14.8\pm0.2)\text{mm}\times(100.5\pm0.4)\text{mm}$ ，帽盖外径为 $(15.8\pm0.15)\text{mm}$ ，高度为 $(12.5\pm0.5)\text{mm}$ 。企业备案产品应按上述要求选择病毒采样管哪种好的规格型号，使生产的产品符合防疫要求。病毒采样管液体又叫病毒保存液，是无毒的，它可以对新鲜的临床病毒标本进行蛋白变性而起到病毒灭活作用，保障运输及检测人员的安全。病毒采样管中的病毒保存液通常分为两种即灭活型和非灭活型：广西灭活病毒采样管出口企业目前生产病毒采样管的厂家有很多质量也参差不齐，深圳美迪科生物一次性使用病毒采样管灭活款+非灭活款。



适用范围广本保存管除能保存冠状病毒外，还可以保存流感、禽流感、HPV、手足口病等多种病毒样本

- 1、灭病毒：快速灭活样本病毒免除生物安全隐患
- 2、保核酸：室温下稳定存储1个月
- 3、耐高温：核酸样本可在50℃条件下保存3天
- 4、易储运：采集后的样本，可在常温条件下存储和运输
- 5、范围广：适用于多种病毒的采集

一次性病毒采样管兼具灭活/非灭活两种保存液，单拭子/双拭子两种包装可以选择。采样拭子采用单独包装，拭子柄在任意位置易折断。一次性病毒采样管使用时，需要注意以下事项：

深圳市美迪科生物医疗科技有限公司一次性使用病毒采样管(灭活款)能快速灭活病毒是一种通用采样产品，避免气溶胶风险，可用于各种病毒样本、及支原体、脲原体、衣原体等标本的采样，2-8℃短时间保存与运输以及-80℃冰箱或液氮环境中的长时间保存。高效灭活病毒，避免气溶胶风险

产品特点：灭活款病毒运送培养基的成分包括Hank's液、冷冻保护剂、生物缓冲剂、氨基酸、灭活剂和RNA保护剂，对病毒样本进行灭活及保护RNA不降解。病毒运送培养基中运用多种联合，有效防止细菌污染。加厚与防渗漏设计，保证样本不泄漏，符合WHO规定以及生物安全规定

深圳美迪科生物一次性使用病毒采样管可搭配多种规格尺寸、鼻咽拭子 多种保存液容量 灭活与非灭活款。



深圳美迪科生物一次性病毒采样管采用高效病毒灭活技术和植绒拭子。可用于临床冠状病毒、流感、禽流感(如H7N9)、手足口病毒、麻疹等病毒标本以及衣原体、支原体、尿素血浆的采集和储存。做核酸用的病毒采样管是什么材质?采样管:管体和管帽均为聚丙烯材质,螺旋口可封闭,盖帽为平盖。管体透明,可视度好。特点和规格:室温(4~30℃)储存,有效期12个月。采样后灭活型保存液室温保存14天,非灭活型保存液低温(2~8℃)保存72h。采样管在-80℃低温环境保存不变形。内含标本运输袋。深圳美迪科生物病毒采样管安全高效:我们专门添加了防冻剂,有利于病毒的长期保存。添加的生物缓冲液更有利于病毒在液体环境中保持核酸的稳定性。操作简单:植绒拭子确保大量的样品采样和释放。特有折断点设计。ABS杆上有特有的折断点设计,根据不同的标本保留要求,可轻松折断放入细胞保存液中方便运输。多种规格:非灭活和灭活采样管,满足您不同的临床需求。病毒采样管用于从采样现场到检测实验室运送鼻咽拭子标本或特定部位的安排标本,以待进行PCR提取与检测。云南五混一病毒采样管价格

深圳美迪科生物医疗5混1、10混1、20混1灭活型病毒采样管,适用于冠状病毒检测的大规模筛选。广西灭活病毒采样管出口企业

生产工艺成熟稳定,采用全自动流水线自动化生产。配方经典主流。病毒采样管内为病毒裂解和保存液,内含胍盐和稳定剂,采集到的样本与其混合后,病毒会被快速裂解,释放出核酸。液体中的稳定剂能够保护释放出来的(RNA或DNA)免遭RNase与DNase的降解。经此保存液处理的样品可用于后续的核酸检测,并与磁珠提取,柱膜提取等提取方法兼容。第三,包装规格合理便捷。产品分2种规格以适应不同需求,用于单采,管子规格为5mL,内装3mL液体,用于混采(10混1),管子规格为10mL,内装6mL。广西灭活病毒采样管出口企业

深圳市美迪科生物,是一家专业生产一次性采样拭子、一次性使用病毒采样管、一次性使用唾液采集器等产品的国家高新技术企业,入驻于深圳宝龙生物药创新发展先导区,以“成为世界前列体外诊断耗材供应商”为企业愿景,实现生物技术自主可控的战略使命,致力于打造生命科学领域生物耗材“一站式”智造及服务平台。

美迪科生物先后投资2亿多元，建设了20000m²生产基地，拥有万级和十万级洁净厂房，面积逾1500平方米，拥有高精密模具加工中心，引进进口电动注塑机，精湛的生产工艺，严格的质量管理体系，有效地保证了产品的精密度以及稳定性，满足客户个性化、多样化需求。